



Legemiddelkabinetter i OUS

Nettverkssamling legemiddelhåndtering Brummundal 27.4.23

Hilde Sporsem, Klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket Oslo, Farmasøytiske tjenester:


Akuttmottak



Generell intensiv



PO1 og PO2

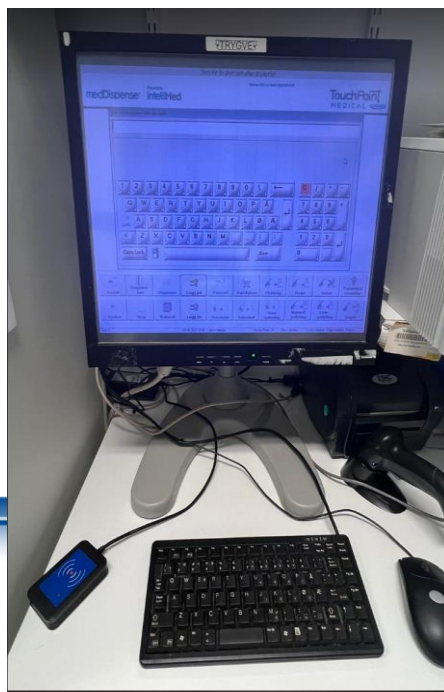

Funksjoner

System status
 Forordning
 Plukklister
 Legevakt fakturabilag

Vedlikehold

Brukere
 Brukergrupper
 Avdelinger
 Pasienter
 Administrerte transaksjoner
 Vareregister
 Varekoderegister
 Varekategorier
 Importer vareregister
 Jobbplanlegger
 Midlertidige lokasjoner
 Bufferlager

Bestilling

Varebestilling
 Bestillingsalternativ

Analyse

Historikk
 Logg for skuffeåpninger
 Databasesporing
 Innsynsrapport

Rapporter

Brukerrapport
 Brukerrapport med avdeling
 Lagerstatusrapport detaljert
 Lokasjonsrapport
 Byttekoderapport
 Narkotikarapport apotek
 Narkotikarapport detaljert
 Detaljert forbruksrapport
 Kostnadsrapport
 Varetellingsrapport
 Produkter sist plukket
 Utløpsdato alarm
 Utløpsdato detaljert
 Årsaksrapport
 Tømmeretur rapport

Logg inn
 Logg ut

US

Varer

Søk i:

 ATC kode Varenr. Varenavn

Søkebegrep:

>>>

Nullstill

Legg til vare

Opprette ny vare

Skriv ut

1 2 3						
	Varenr.	Varenavn	Generisk navn	Enhet	Styrke	Innhold
Velg	466964	Alfentanil inj 0,5 mg/ml 10 ml	Alfentanil	STK	5 mg	5
Velg	165710	Alfentanil inj 0,5 mg/ml 2 ml	Alfentanil	STK	1 mg	1
Velg	354851	Diazepam inj 10 mg/2ml 2 ml	Diazepam	STK	10 mg	10
Velg	111111	Dolcontin depotkapsel 20 mg	Morfin	STK	20 mg	0
Velg	060141	Fentanyl depotpl 100 mcg/t	Fentanyl	STK	100 mcg	100
Velg	080314	Fentanyl depotpl 12 mcg/t	Fentanyl	stk	12 mcg	12
Velg	080323	Fentanyl depotpl 25 mcg/t	Fentanyl	STK	25 mcg	25
Velg	080332	Fentanyl depotpl 50 mcg/t	Fentanyl	STK	50 mcg	50
Velg	007016-1	Fentanyl inj 50 mcg/ml 1x10 ml	Fentanyl	STK	50 mcg	50
Velg	007007	Fentanyl inj 50 mcg/ml 2 ml	Fentanyl	STK	100 mcg	100
Velg	007016	Fentanyl inj 50 mcg/ml 5x10 ml	Fentanyl	STK	500 mcg	2500
Velg	007016-2	Fentanyl inj påfyllingsvare (ikke til pasient)	Fentanyl	STK	50 mcg	10
Velg	9991	Fox (sitron)	Glukose	STK	0	0
Velg	390694	Ketamin Abcur inj 10 mg/ml 5 ml	Ketamin	STK	50 mg	50
Velg	416708	Ketamin Abcur inj 50 mg/ml 5 ml	Ketamin	STK	250 mg	250
Velg	383498	Ketanest inj 25 mg/ml 2 ml	Esketamin	STK	50 mg	50
Velg	123456	Ketobemidon inj 20 mg/ml 10 ml	Ketobemidon	STK	200 mg	1
Velg	019140	Ketorax inj 5 mg/ml 1 ml	Ketobemidon	STK	5 mg	5
Velg	016272	Lyrica kaps 150 mg	Pregabalin	STK	150 mg	150
Velg	016340	Lyrica kaps 75 mg	Pregabalin	STK	75 mg	75
Velg	333161	Metadon mikst 10 mg/ml 100 ml	Metadon	ML	1000 mg	1000
Velg	417490	Midazolam inj 1 mg/ml 1x5ml	Midazolam	BRETT	5 mg	5
Velg	188202-1	Midazolam inj 5 mg/ml 1x10ml	Midazolam	STK	50 mg	50
Velg	188202	Midazolam inj 5 mg/ml 5x10 ml	Midazolam	STK	50 mg	250
Velg	536179-2	Midazolam inj påfyllingsvare (ikke til pasient)	Midazolam	STK	50 mg	50

1 2 3

Legg til vare

Opprette ny vare

Lagre Slett Avbryt	
Varenummer:	007016
Varenavn:	Fentanyl inj 50 mcg/ml 5x10 ml
Generisk navn:	Fentanyl
Kategori:	Narkotika
Automatenhet:	STK
Doseform:	injeksjon
Styrke innerpakning:	500
Styrkeenhet innerpakning:	mcg
Ant innerpakninger i automatenhet:	5,00
Enhet innerpakning:	amp
Innhold virkestoff i automatenhet:	2500
Enhet virkestoff i aut.enhet:	
Administrasjonsvei(er):	
Inngår i bestilling:	<input checked="" type="checkbox"/>
Tralleware:	<input type="checkbox"/>
Beholdningsbekreftelse:	<input type="checkbox"/>
Anbud:	<input type="checkbox"/>
Anbefalt:	<input type="checkbox"/>
Etikettype:	Ingen etikett
Etikettekst:	
ATC-kode:	N01AH01
Returlokasjon:	Boks
Minste leverte antall:	2
Antall i esken:	2
Antall numerisk:	0
Pakningsenhet:	
Pakningstype antall:	0,00
Pakningstype:	
Multippel:	1
Kommentar:	
Pris:	0,00
LegemiddelID:	
Oppdatert av:	
Oppdatert:	01.01.1900 00:00:00
Sist godkjent av:	
Sist godkjent:	01.01.1900 00:00:00
Ekstern ID:	
Lagre Slett Avbryt	

Administrere lokasjoner

Vare: 007016 Fentanyl inj 50 mcg/ml 5x10 ml

	Automat	Lokasjon	Lokasjon type	Max lager	Best.pkt.	Beholdning	
Endre	2 (INTENSIV)	02.01.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.21.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.20.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.19.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.18.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.17.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.16.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.15.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.14.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.13.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.22.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.12.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.10.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.09.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.08.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.07.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.06.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.05.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.04.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.03.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.02.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	02.11.02.xx	D	3	72	3	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	50.00.00.11	B	0	72	8	Slett

Legg til Lokasjon Wiz

Legg til Lokasjon Man

Avbryt



Varebestilling

Velg automat:

Varer som er bestillbare

Ta hensyn til eksisterende lister

>>>

Nullstill

Send bestilling

Utskrift bestilling

Bestillingsnummer: 041401465702

Varenr.	Varenavn	I best	Saldo	BP	Max ant	Antall/p	Min lev	Behov/d	Behov/p	Doser å	Pakn.be
<input checked="" type="checkbox"/> 449298	Morfin epidural inj 2 mg/ml 2 ml	0	7	14	24	10	10	17	1,7	10	1

Administrere lokasjoner


Vare: 425058 Sobril tabl 10 mg



	Automat	Lokasjon	Lokasjon type	Max lager	Best.pkt.	Beholdning	
Endre	2 (INTENSIV)	01.06.02.xx	D	12	20	12	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	01.07.02.xx	D	12	20	12	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	01.08.02.xx	D	12	20	12	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	01.09.02.xx	D	12	20	12	Slett
Endre	2 (INTENSIV)	50.00.00.13	B	0	20	14	Slett
Endre	3 (PO1)	01.03.02.xx	D	12	10	3	Slett
Endre	4 (PO2)	01.08.04.xx	D	12	20	12	Slett
Endre	4 (PO2)	01.12.04.xx	D	12	20	8	Slett

Legg til Lokasjon Wiz

Legg til Lokasjon Man

Avbryt

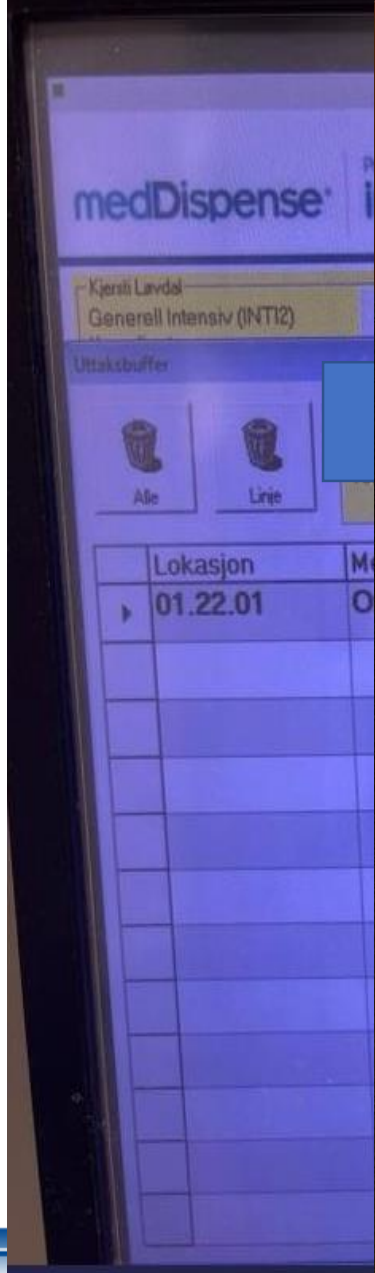

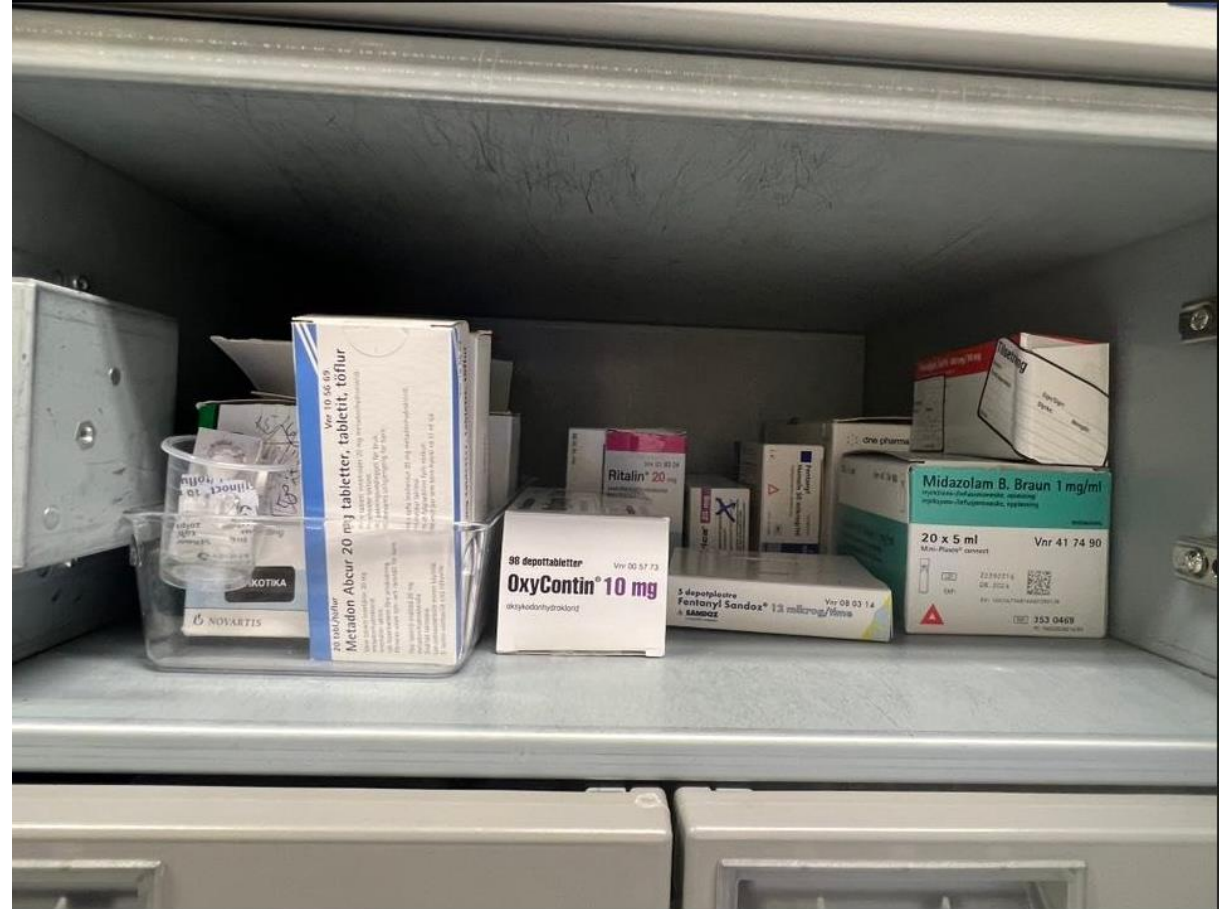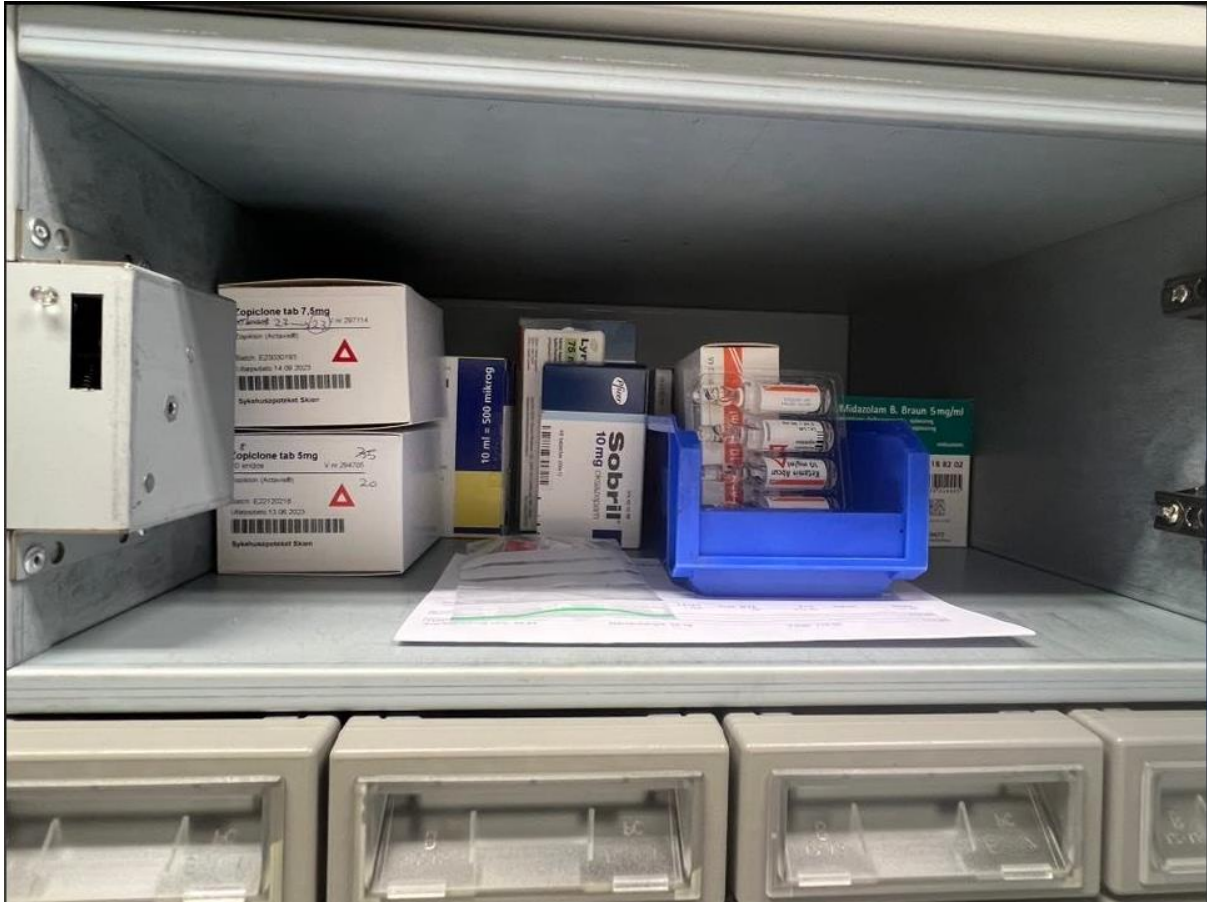

Narkotika rapport

Velg automat:

Velg varekategori:

Fra dato:

Til dato:

>>>

Nullstill

Utskrift rapport

Varenr.	Varenavn	Start	Slutt	Plukking	Retur	Avfall	Start Buffer lager	Slutt Buffer lager	Påfylling Retur	Påfylling Annen kilde	Påfylling manuelt fra Apotek	Påfylling liste fra Apotek	Påfylling til Buffer fra Apotek	Påfylling fra Apotek	Korrek sjoner	Teknisk avvik
466964	Alfentanil inj 0,5 mg/ml 10 ml	14,0	20,0	-44,0	1,0	0,0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0
165710	Alfentanil inj 0,5 mg/ml 2 ml	16,0	21,0	-15,0	1,0	0,0	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0
080323	Fentanyl depotpl 25 mcg/t	6,0	3,0	-2,0	0,0	0,0	0	0	0	0	5	0	0	5	-6	0
080332	Fentanyl depotpl 50 mcg/t	5,0	6,0	-1,0	0,0	0,0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
007016-1	Fentanyl inj 50 mcg/ml 1x10 ml	38,0	44,0	-54,0	11,0	0,0	0	0	5	0	53	0	4	57	-2	0
007016	Fentanyl inj 50 mcg/ml 5x10 ml	60,0	66,0	-88,0	6,0	0,0	8	8	8	0	83	0	3	86	0	0
390694	Ketamin Abcur inj 10 mg/ml 5 ml	6,0	6,0	-1,0	0,0	0,0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	0
416708	Ketamin Abcur inj 50 mg/ml 5 ml	11,0	12,0	-33,0	4,0	0,0	20	18	2	0	0	0	30	30	0	0
383498	Ketanest inj 25 mg/ml 2 ml	35,0	35,0	-20,0	0,0	0,0	0	0	0	0	14	0	6	20	0	0
333161	Metadon mikst 10 mg/ml 100 ml	100,0	199,0	-1,0	0,0	0,0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0
449298	Morfin epidural inj 2 mg/ml 2 ml	10,0	7,0	-3,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171174	Morfin inj 10 mg/ml 1 ml	14,0	18,0	-17,0	0,0	0,0	0	0	1	0	20	0	0	20	0	0
011437	Morfin inj 10 mg/ml 10 ml	6,0	6,0	-2,0	0,0	0,0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0
005604	OxyContin depottabl 10 mg	15,0	32,0	-27,0	4,0	0,0	0	0	2	42	0	0	0	0	0	0
005706	OxyContin depottabl 20 mg	30,0	21,0	-9,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013346	OxyContin depottabl 5 mg	24,0	46,0	-6,0	0,0	0,0	0	0	0	0	28	0	0	28	0	0
432994	OxyNorm inj 10 mg/ml 1 ml	53,0	58,0	-113,0	5,0	0,0	0	0	5	0	110	0	3	113	0	0
009521	OxyNorm kaps 5 mg	39,0	22,0	-103,0	4,0	0,0	0	0	2	0	84	0	0	84	0	0
009587	OxyNorm mikst 1 mg/ml 250 ml	729,0	819,0	-160,0	0,0	0,0	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0
016626	Petidin inj 50 mg/ml 1 ml	18,0	24,0	-4,0	2,0	0,0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0
206717	Standard EDA 550 ml	8,0	13,0	-18,0	0,0	0,0	0	0	0	0	23	0	0	23	0	0
199661	Ultiva inj 5 mg htg	33,0	32,0	-43,0	3,0	0,0	0	0	1	0	40	0	1	41	0	0

TRYGVE (kabinett)

Håndtering av uttak og retur av A- og B-preparater på generell intensiv, INTI2

Uttak: Kabinett

1. Logg inn med ditt tidligere brukernavn og passord. Videre trykker du på generell intensiv.
2. Trykk på uttak og søk på pasienten (navn eller fødselsnummer), **ikke** skann strekkoden på pasientlappen da dette kaster deg ut.
3. Velg ønsket medikament og antall, viktig med mikstur at det registreres riktig mengde (ml).
4. Gå til «kurv» og trykk deretter på uttak.
5. Når skuffen lyser er det viktig at skuffen blir tatt helt ut i en bevegelse.
 - a. Om det mangler medikament i skuffen kan du gjenta uttaket på det aktuelle medikamentet på nytt og skriv i beskjedboka.
 - b. Om det kommer ut flere ampuller eller tabletter/kapsler enn du har «bestilt», returnerer du dette i returskuffen og skriver i beskjedboka
 - c. Hvis du har trykket feil eller ikke skal ha medikamentet i skuffen, må du ta ut det som ligger i skuffen og returnere i returskuff.

Det er mulig å ta ut medikamenter til pasient fra operasjon eller akuttmottaket om det er meldt at de trenger dette ved ankomst, ved å gå inn på den aktuelle posten. Hvis pasienten sitt navn ikke er kjent, bruk nødpasient (i stedet for generell intensiv) og skriv i beskjedboka.

Retur: Kabinett

1. Logg inn med ditt tidligere brukernavn og passord. Videre trykker du på generell intensiv.
 2. Trykk på retur og søk opp pasienten med navn eller fødselsnummer.
 3. Da kommer det opp medikamenter som det er gjort uttak på, på den aktuelle pasienten. Hvis det aktuelle medikamentet ikke er registrert har du to muligheter.
 - a. Returnere til toppskapet og skrive ned i permen, viktig med pasientens navn og at det stemmer med antall. (Se neste side for ytterligere detaljer).
 - b. Returnere på nødpasient (i stedet for generell intensiv) og skrive det i beskjedboka.
 4. Husk å registrer riktig antall i retur av samme medikament og hvis du har ulike medikamenter som skal returneres er det viktig at alt dette registreres før du åpner skuffen. Slik alle medikamenter og riktig antall stemmer med det som blir lagt i returskuffen.
- Gå til 1 og velg nødpasient når dette er nødvendig.

Ingen andre medikamenter enn A- og B-preparater skal i returskuffen!

Takk for oppmerksomheten!

